


Behandlingsrekommendationer vid olika tillstånd.

5.1 Högt blodtryck.

Resultat uppnås genom behandling av bakhuvudet/nacken.

Vid högt blodtryck orsakat av att artärerna som förser njurarna med blod är förträngda, skall även njurarna behandlas. (Se bilden).

Inställningar	Level 2 Mode 3
Behandlingstid	15-20 min.
Behandlingar /dag	1-2
Behandlingskur	8-10 behandlingar

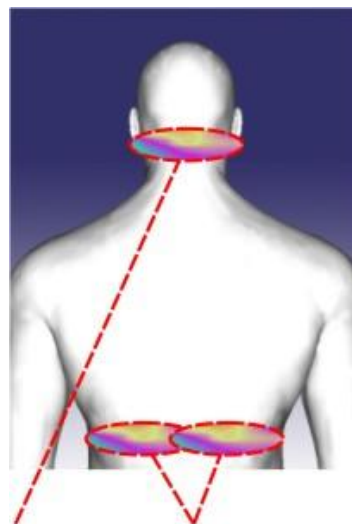


10 min./5min. per zon

5.2 Återhämtning efter en hjärtattack.

Behandla solarplexus och bakhuvud/nacke.

Inställningar	Level 2 Mode 1, 3
Behandlingstid	20 min.
Behandlingar /dag	1-2
Behandlingskur	6-10 behandlingar

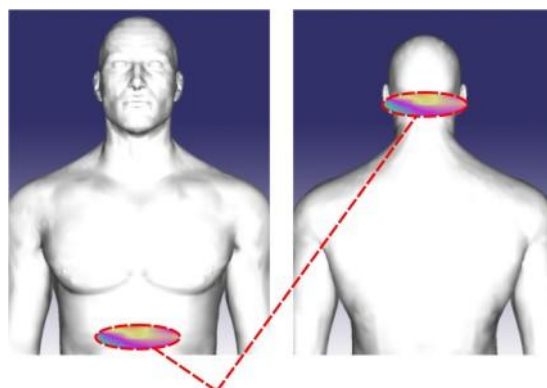

10min. för varje zon

5.3 Återhämtning efter en stroke.

Verkan erhålls genom behandling av solarplexus, nacke/bakhuvud och det drabbade området. (Kan exempelvis vara en arm, som inte fungerar)


Följande behandlingsschema rekommenderas:

Första behandling sker mot solarplexus och nacke under fem min.


Inställningar och tid: Level 2, Mode 1 under fem min. Level 2, Mode 1- 3 under fem min på varje behandlingszon.

Andra behandling för dagen äger rum 3 – 4 timmar efter den första behandlingen och då behandlas det drabbade området . Inställningar och tid: Level 2, Mode 1 under fem min. Level 2, Mode 1-3 under 15 min.

Inställningar	Level 2 Mode 1, 1-3
Behandlingstid	20 min.
Behandlingar /dag	1-2
Behandlingskur	8-10 behandlingar

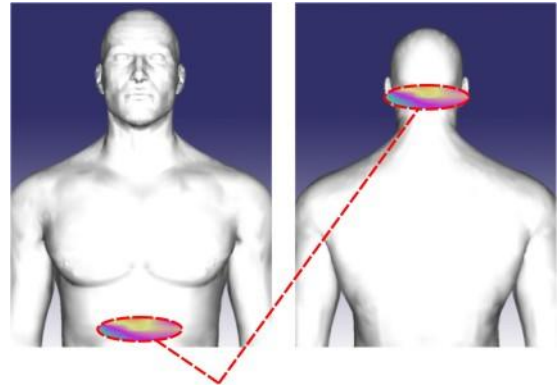

10 min. för varje zon

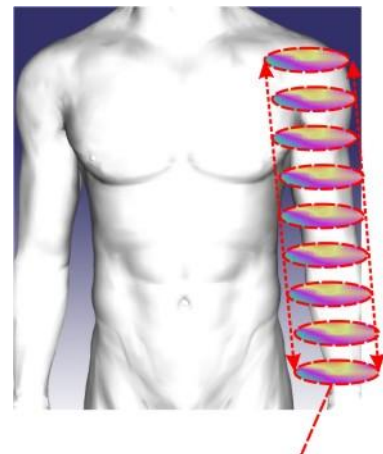


20 min. för drabbad zon

5.4 Kranskärslsjukdom, arytmi.

Behandling sker mot solarplexus och bakhuvud/nacke

Inställningar	Level 2 Mode 1, 1-3
Behandlingstid	20 min.

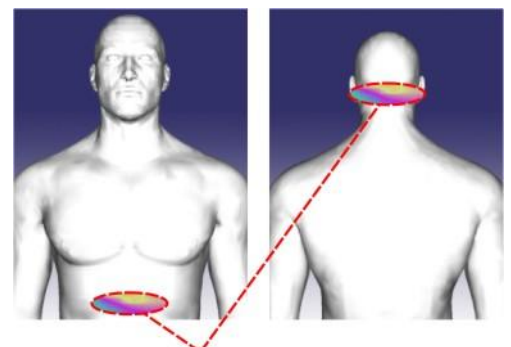


Behandlingar /dag	1-2
Behandlingskur	2-4 behandlingar

10 min för varje zon

5.5 Neuroser, sömnstörningar

Behandling sker mot solarplexus, nacke och halskotor


Inställningar	Level 2 Mode 3, 1-3
Behandlingstid	10-15 min.
Behandlingar /dag	1-2
Behandlingskur	2-4 behandlingar

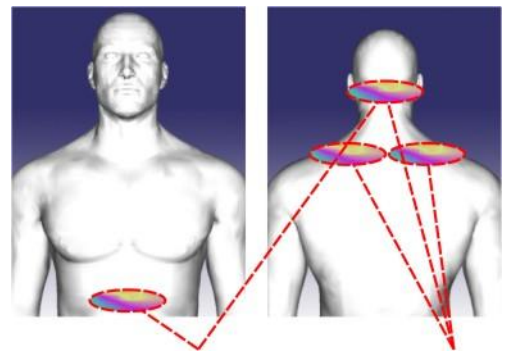

5 min för varje zon

5.6 Huvudvärk ("migrän")


Inställningar	Level 2 Mode 1, 1-3
Behandlingstid	10-15 min.
Behandlingar /dag	1-2
Behandlingskur	2-4 behandlingar

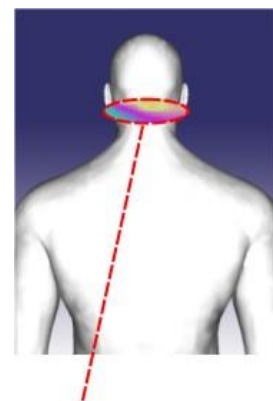

10-15 min.

5.7 Tandvärk, gingivit, blemmor/blåsor imunnen, inflammation av pulpa

Behandla mot område där det värker.

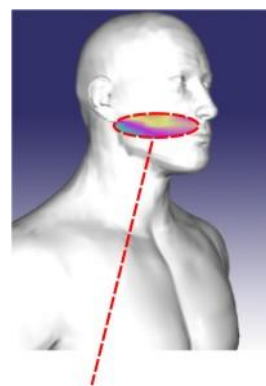



Inställningar	Level 2 Mode 1
Behandlingstid	10 min.
Behandlingar /dag	1-2
Behandlingskur	6-10 behandlingar

10 in.

5.8 Öron-näsa-halsproblem.

Behandling sker på projektionsområdet av det inflammerade örat och på baksidan av örat.


Vid akut sjukdom/besvär	
Inställningar	Level 2 Mode 1
Behandlingstid	10 min.
Behandlingar /dag	1-2
Behandlingskur	8-10 behandlingar
Vid kronisk sjukdomen/besvär	
Inställningar	Level 2 Mode 3, 1-3
Behandlingstid	10-20 min.
Behandlingar /dag	1-2
Behandlingskur	10-12 behandlingar

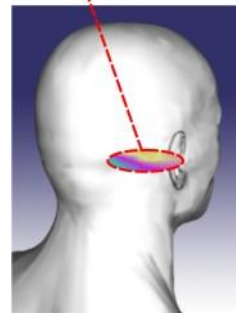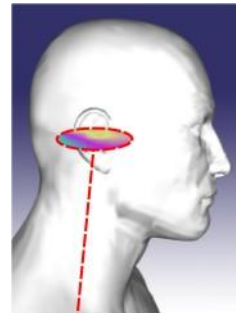

10 min. för varje zon

- **Hörselproblem**

Behandling sker på område bakom örat och på bakhuvudet.

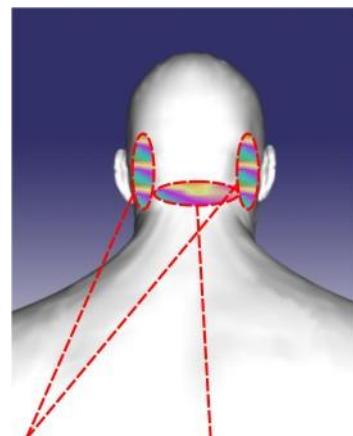


Inställningar	Level 2 Mode 3, 1-3
Behandlingstid	15-20 min.
Behandlingar /dag	1-2
Behandlingskur	8-10 behandlingar

5 min för varje zon

• **Rinit (snuva), faryngit (halsont, inflammerat svalg)**

Behandling sker på näsa och hals.

Vid akut tillstånd	
Inställningar	Level 2 Mode 1
Behandlingstid	10 min.
Behandlingar /dag	1-2
Behandlingskur	8-10 behandlingar
Vid kroniska tillstånd	
Inställningar	Level 2 Mode 3, 1-3
Behandlingstid	10-20 min.
Behandlingar /dag	1-2
Behandlingskur	10-12 behandlingar

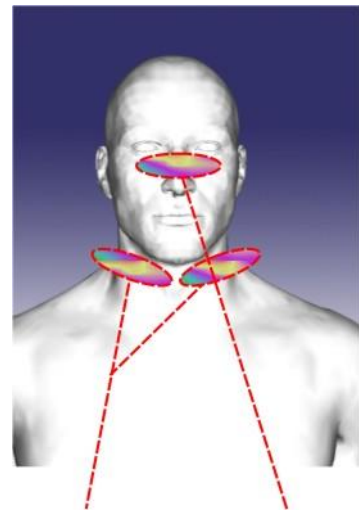


Halsont 5 min. för varje zon
Vid snuva, rinit 10 min.

• **Sinuit (bihåleinflammation).**

Behandling sker på inflammations område.

Akut sinuit

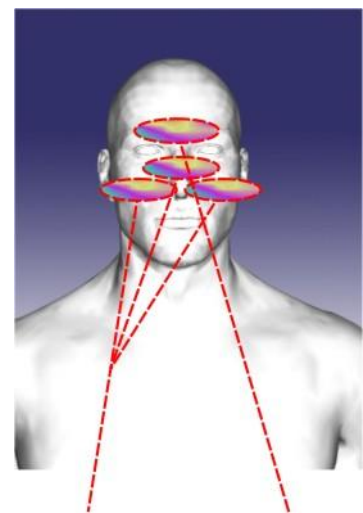


Behandlingsläge	Level 2 Mode 1
Behandlingstid	10 min.
Behandlingar /dag	1-2
Behandlingskur	8-10 behandlingar
Kronisk sinuit	
Inställningar	Level 2 Mode 1
Behandlingstid	10-20 min.
Behandlingar /dag	1-2
Behandlingskur	10-12 behandlingar

Vid frontal bihåleinfamnation 5 min. för varje zon. Vid bihåleinfamnation 10 min.

- **Problem med halsen och luftstrupen**

Behandling mot luftstrupens område.

Den akuta formen av sjukdomen	
Inställningar	Level 2 Mode 1
Behandlingstid	10-20 min.
Behandlingar /dag	1-2
Behandlingskur	8-10 behandlingar
Den kroniska formen av sjukdomen	
Inställningar	Level 2 Mode 3, 1-3
Behandlingstid	10-20 min.
Behandlingar /dag	1-2
Behandlingskur	10-12 behandlingar

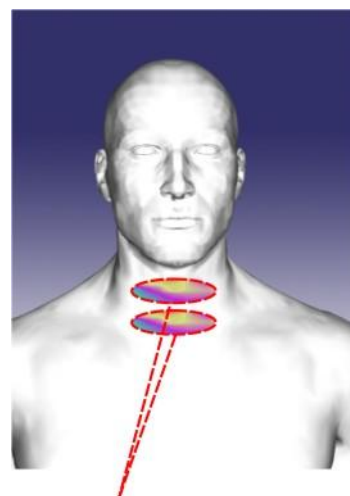


10 min. för varje zon

5.9 Problem med sköldkörteln.

Behandling sker på mot sköldkörteln.


Inställningar läge	Level 2 Mode 1
Behandlingstid	10 min.
Behandlingar /dag	1-2
Behandlingskur	20-30 behandlingar

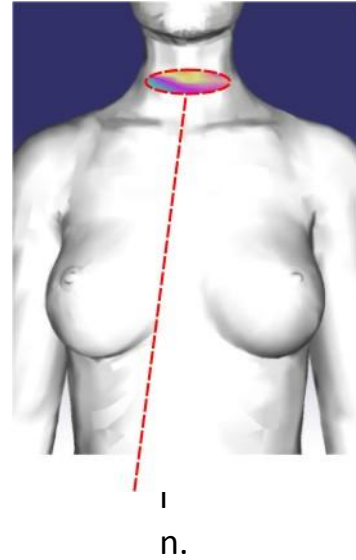

5. 10 Bronkit.

Behandling sker på främre delen av luftrören.

Den akuta formen av sjukdomen	
Inställningar	Level 2 Mode 1
Behandlingstid	20 min.
Behandlingar /dag	1-2
Behandlingskur	10-15 behandlingar
Den kroniska formen av sjukdomen	
Inställningar	Level 2 Mode 3, 1-3
Behandlingstid	10-20 min.
Behandlingar /dag	1-2
Behandlingskur	20-30 behandlingar

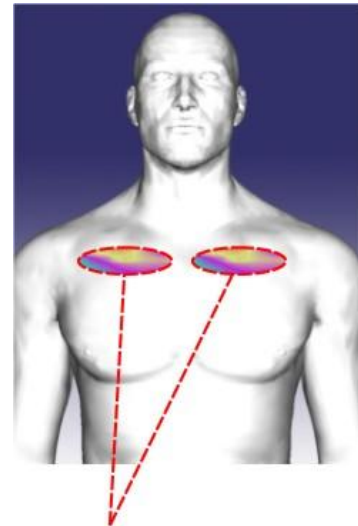


10 min. för varje zon

5.11 Leverproblem

Behandling sker mot levern

Inställningar	Level 2 Mode 3, 1-3,3
Behandlingstid	10-20 min.
Behandlingar /dag	1-2

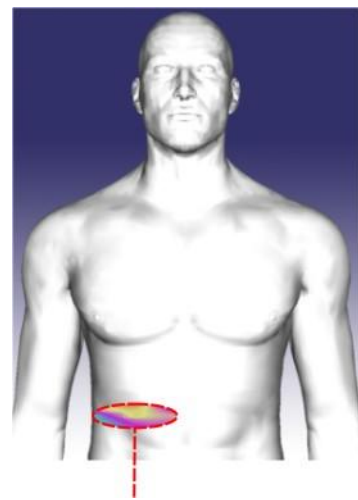

Behandlingskur	20-30 behandlingar
----------------	-----------------------

10 min

5.12 Problem med magtarmkanalen

Behandla mot område med smärta.


För kroniska problem rekommenderas följande:

Mode 1 – under 1:a behandling,

Mode 1-3 - upp till 10 behandlingar,

Mode 3 - från 10:e behandlingar.

Inställningar	Level 2 Mode 1, 1-3, 3
Behandlingstid	10 min.
Behandlingar /dag	1-2
Behandlingskur	15-20 behandlingar

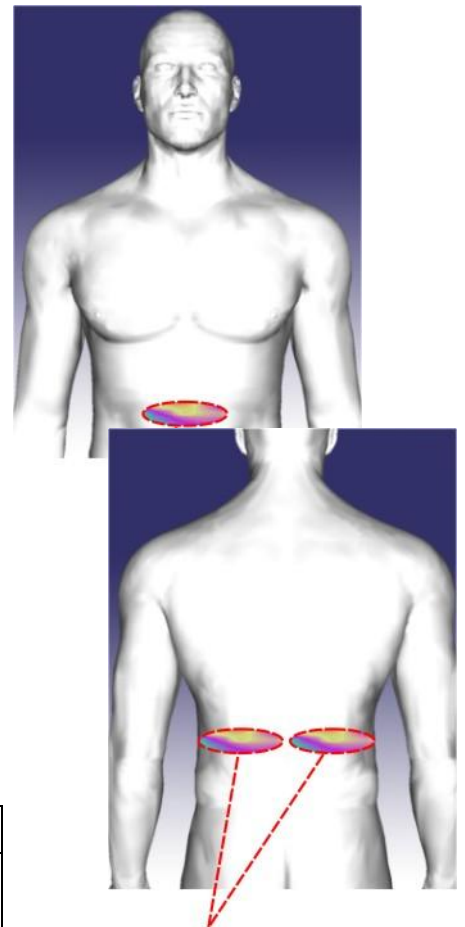

5.13 Njurproblem

Behandling sker mot båda njurar.

Den akuta formen av sjukdomen	
Inställningar	Level 2 Mode 1
Behandlingstid	10 min.
Behandlingar /dag	1-2
Behandlingskur	10-14


	behandlinger
Den kroniska formen av sjukdomen	
Inställningar	I det akuta stadiet av kronisk form börja med Level 2, Mode 1-3 (3-4 dagar), därefter Mode 3
Behandlingstid	10-20 min.
Behandlingar /dag	1-2
Behandlingskur	20-30 behandlinger

10 min. på varje zon

5.14 Interkostal neuroalgi (smärtor i bröstkorgen), Myosit (muskelinflammation).

Behandling sker på område som smärta.

Inställningar	Level 2 Mode 1
Behandlingstid	10-20 min.
Behandlingar /dag	1-2
Behandlingskur	6-8 behandlinger

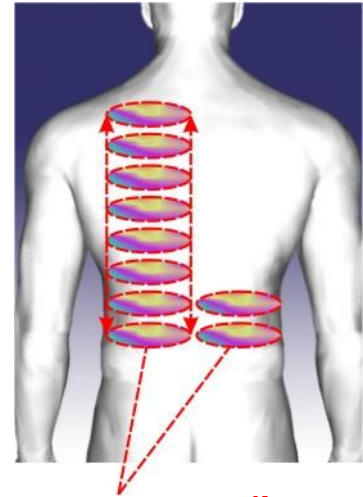


a.

10-20 min.

5.15 Problem med axelleder

Behandling ovan nyckelbenen (supraklavikulärt)

Inställningar I	Level 2 Mode 1-3
Behandlingstid	20 min.
Behandlingar /dag	1-2
Behandlingskur	20-30 behandlinger

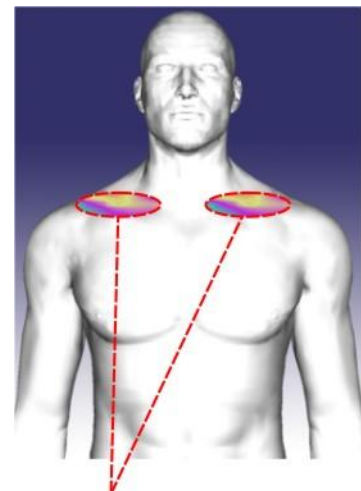


10 min. på varje zon

5.16 Problem med bukspottkörteln

Behandling sker på projektionsområdet av bukspottkörteln.
Minska kostintaget i början och gå mot normal nivå mot slutet av av behandlingen.

Inställningar	Level 2 Mode 1, Mode 3 från 7:e dagen av kuren
Behandlingstid	10-20 min.
Behandlingar /dag	1-2
Behandlingskur	20-30 behandlingar

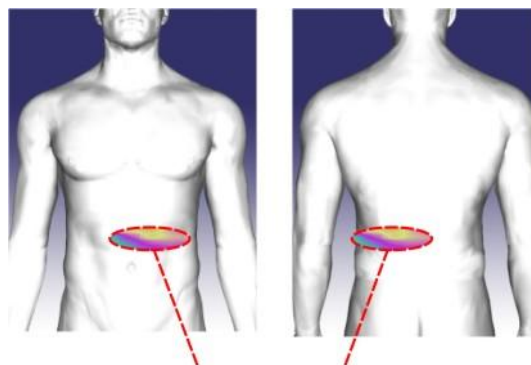

10 min. på varje zon

5.17 Problem med prostata, impotens.

Behandling sker på den nedre delen av buken, i projektionsområdet av prostatan.

Vid akuta besvär	
Inställningar	Level 2 Mode 1
Behandlingstid	10 min.
Behandlingar /dag	1-2
Behandlings kur	10-14 behandlingar
Vid kroniska besvär	
Inställningar	Level 2 ; Mode 1-3 Mode 3 från 7:de dagen av kuren
Behandlingstid	10-20 min.

Behandlingar /dag	1-2
Behandlingskur	20-30 behandlingar




10 min på varje zon

5.18 Problem med urinblåsan

Behandling sker på den nedre delen av magen, på blåsans område.

Vid akuta besvär	
Inställningar	Level 2 Mode 1
Behandlingstid	10 min.
Behandlingar /dag	1-2
Behandlingskur	10-14 behandlingar
Vid kroniska besvär	
Inställningar	Level 2 Mode 1-3 Mode 3 från 7:de dagen av kuren
Behandlingstid	10-20 min.

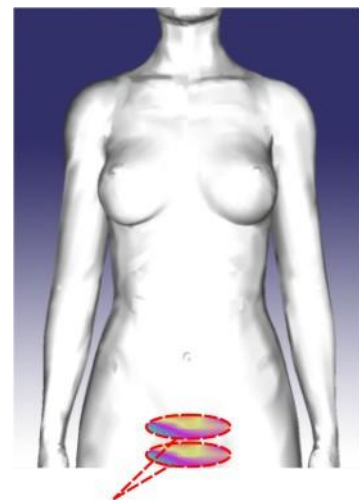


Behandlingar /dag	1-2
Behandlingskur	20-30 behandlingar

10 min. för varje zon

5.19 Problem med äggstockarna

Behandling sker på den nedre delen av buken, i projektiionsområdet av den högra eller vänstra äggstocken.

Vid akuta besvär	
Inställningar	Level 1, 2; Mode 1
Behandlingstid	20 min.
Behandlinga per dag	1-2
Behandlingskur	10-14 behandlingar
Vid kroniska besvär	
Inställningar	Level 2, Mode 3, 1-3
Behandlingstid	20 min.
Behandlingar/1 dag	1-2
Behandlingskur	20-30 behandlingar

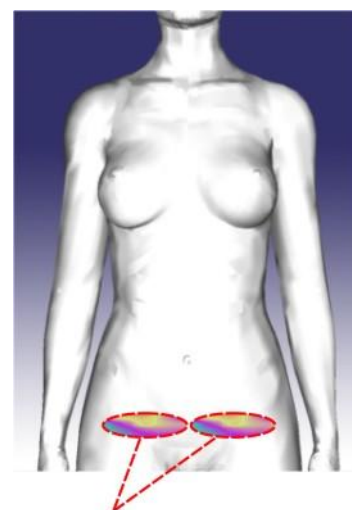


10 min. för varje zon

5.20 Cervikal osteokondros.(Smärta längs ryggen)

Behandling sker på halskotorna. Dessutom, vid kronisk sjukdom, är det önskvärt med ytterligare behandling på hela ryggraden


Inställningar läge	Level 2 Mode 1, 1-3
Behandlingstid	20 min.
Behandlingar /dag	1-2
Behandlingskur	4-6 behandlingar

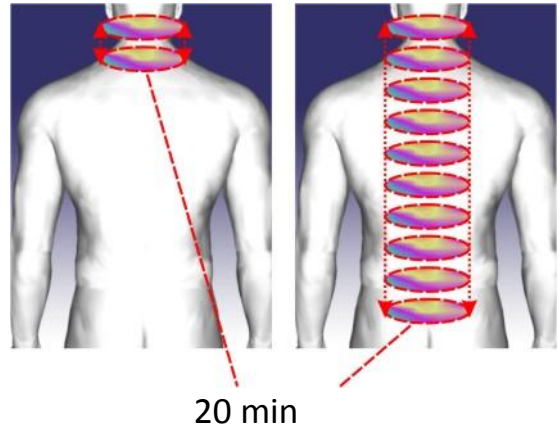

5.21 Lumbar - ischias.

Behandling sker på mot ländryggraden. När smärtan strålar uppåt, bearbeta baksidan av benet vid varje behandlingstillfälle.


Inställningar	Level 2 Mode 1, 1-3
Behandlingstid	20 min.
Behandlingar /dag	1-2
Behandlingskur	4-6 behandlingar

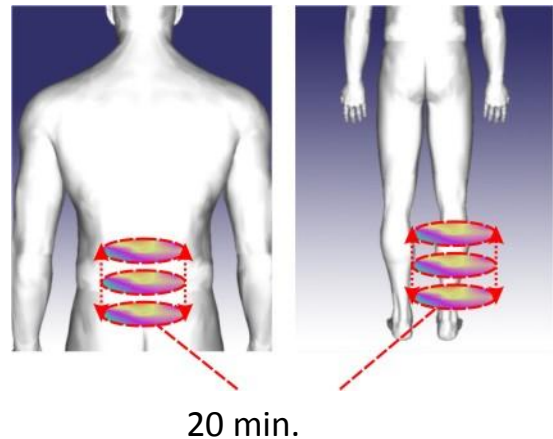

5.22 Neuralgi av ischiasnerven.

Behandling sker på baksidan av lårbenets muskelgrupp och skenbenet

Inställningar	Level 2 Mode 1, 1-3
Behandlingstid	20 min.
Behandlingar /dag	1-2
Behandlingskur	10-14

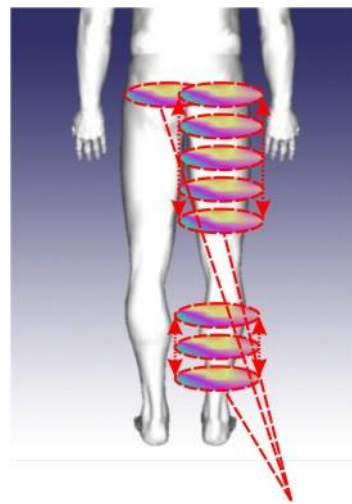

	behandlings
--	-------------


20 min.

5.23 Svullnad, smärta, begränsad rörlighet i lederna med olika skador (blåmärken, stukningar, frakturer) och artrit av olika orsak. Posttraumatiska störningar i fotleden, vrickningar.

Behandling sker på fotleden där smärta finns.

Kur om ca.10 behandlingar med behandlingsläge Mode 2. Om så är nödvändigt en månad senare upprepa kuren med Mode 3.

Inställningar	Level 2 Mode 2, 3
Behandlingstid	20 min.
Behandlingar /dag	1-2
Behandlingskur	10-20 behandling

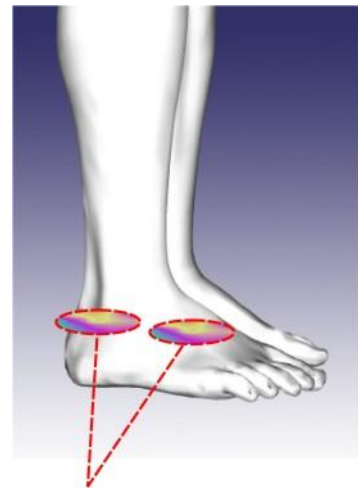


10 min. för varje zon

5.24 Artros i knät.

Behandling sker på och runt knäleden.

Inställningar	Level 2; Mode 1 vid ödem, skarp smärta; från 2-3 behandlingar med Level 2; Mode 2; från 10-15 behandling (beroende på smärta) Level 2; Mode 3
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

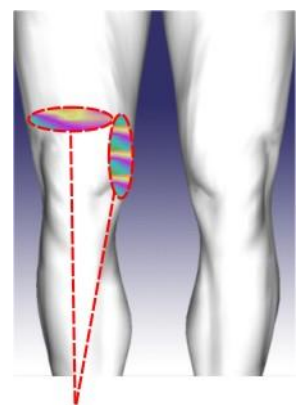

Behandlingstid	20 min.
Behandlingar/dag	1-2
Behandlingskur	20-30 behandlingar

10 min. för varje zon

5.25 Koxartros (deformerande artros i höftleden).

Behandling sker på smärtans område.

Inställningar	från 2-3 behandlingar - Level 2 Mode 1-3, från 10-15 behandling (beroende på smärta Level 2; Mode 3
Behandlingstid	20 min.
Behandlingar/ dag	1-2
Behandlingskur	25-30 behandlingar




20 min.

5.26 Ont i handleden (syndrom "shoulder brush").

Behandling sker utanpå där det gör ont

Inställningar	Level 2 Mode 1, 1-3
Behandlingstid	20 min.
Behandlingar/ dag	1-2
Behandlingskur	25-30 behandlingar

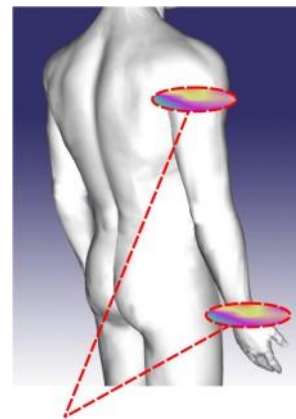


10 in på varje zon

5.27 Ont i armbågsleden.

Behandling sker på ut-insida av armbågen.

Inställningar	Level 2 Mode 1, 1-3
---------------	------------------------

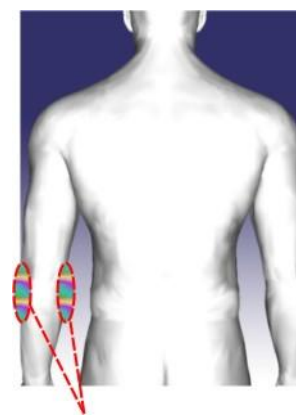


Behandlingstid	20 min.
Behandlingar/ dag	1-2
Behandlingskur	25-30 behandlingar

10 min/per sida

5.28 Ont i axelleden.

Behandling sker på båda sidor.

Inställningar	Level 2 Mode 1, 1-3
Behandlingstid	20 min.
Behandlingar/ dag	1-2
Behandlingskur	25-30 behandlingar

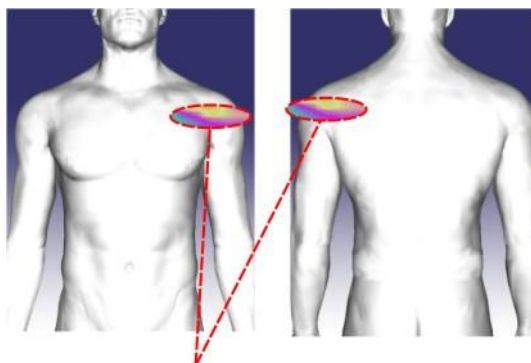


10 in för varje zon

5.29 Eliminering av stagnation i bäckenet.

Behandling sker jämnt på höger och vänster sida under kuren.

Inställningar	Level 2 Mode 1-2, från 10:e behandling Mode 3
Behandlingstid	20 min.
Behandlingar/ dag	1-2
Behandlingskur	20-30 behandlingar

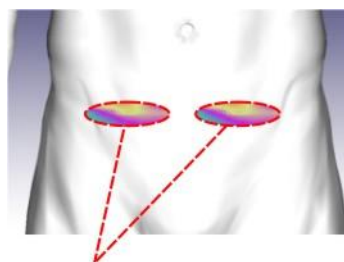


10 min. för varje zon

5.30 Ta bort dåsighet och trötthet.

Behandling sker på solarplexus, bakhuvudet eller halskotorna.

Inställningar	Level 2 Mode 3, 1-3
Behandlingstid	10-15 min.
Behandlingar/ dag	1-2
Behandlingskur	2-4 behandlingar

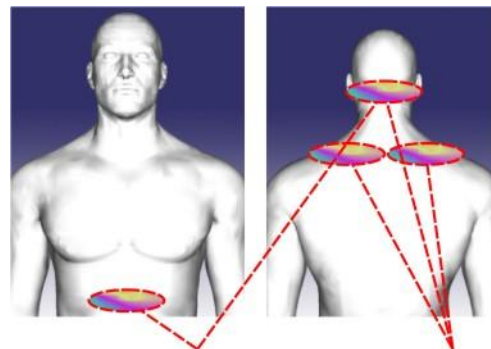


5 min/2 zoner eller 5 min./3 zoner

5.31 Allergi

Behandling sker på nacke och näsan.

Inställningar	Level 2 Mode 1, 1-3
Behandlingstid	10 min.
Behandlingar/ dag	2
Behandlingskur	8-12 behandlingar

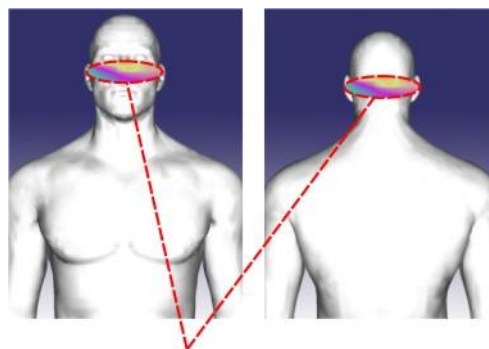

5 min. för varje zon

5.32 Skador, brännskador, sår.

Behandling sker på det skadade området direkt genom bandage eller gips.

Inställningar	Level 2 Mode 1, 1-3
Behandlings tid	10 min.
Antal behandlingar/1 dag	1-2
Behandlings kur	20-30 behandlingar

5.33 Återhämtning efter intensiv träning.

Behandling sker på områden som mest sannolikt kan skadas (leder och mest ansträngda muskelgrupper). Behandling rekommenderas på solarplexus och bakhuvudet, 1x 10 min. precis före träning och en behandling om 10 min. före sänggåendet.

Inställningar	Level 2 Mode 3, 1-3
Behandlingstid	10 min.
Behandlingar/dag	1-2
Behandlingskur	8-12 behandlingar

Kontraindikationer

Generellt finns inga kontraindikationer för användning av Akvaton.

Relativa kontraindikationer:

- Blödningsbenägenhet;
- Trombocytopeni och koagulopati (blödarsjuka)
- Systemiska blodsjukdomar
- Svår hjärtarytmi (förmaksflimmer, paroxysmala takyarytmi).
- Användning av pacemaker
- Utvidgade kranskärl, utvidgad aorta och stora kärl
- Alkohol och psykisk påverkande medel
- Akut varbildning i huvudet;
- Aktiv tuberkulos
- Hypertyreos
- Vara havande
- Andningsproblem
- Vid närvaro av tumörer skall läkare medverka vid behandling

1. Приложение

Appendix

COMPANY INFORMATION:

”Telemak” LLC, Russia 410033, Saratov,
пр-т 50 лет Октября, д. 101, корп. 4, этаж 3
Tel./Fax (8452) 48-82-95, 48-82-96, 48-82-97,
e-mail: market@telemak-saratov.ru
<http://www.telemak-saratov.ru>
<http://www.aquatone.su>

3

- Andnings misslyckande;
- Graviditet;
- Närvaron av tumörer i någon etiologi användning av enheten måste utföras strikt under överinseende av en läkare.

2. TILLÄGG

Parameternamn	Betydelse
1. Arbetsfrekvens, MHz	1000,5±0,2
2. Uteffekt, W,	
2.1 Level 1, watt	$(4 \pm 1,6) \times 10^{-9}$
2.2 Level 2, watt	$(8 \pm 2,6) \times 10^{-9}$
2.3 Level 3, watt	$(16 \pm 4,6) \times 10^{-9}$

3. Frekvensens med amplitudmodulering	modulering
3.1 Mode 1, Hz	0
3.2 Mode 2, Hz	0,1±0,015
3.3 Mode 3, Hz	8±0,5
3.4 Mode 1-2, Hz	16±1
3.5 Mode 1-3, Hz	4±0.5
4. Djupet av amplitudmodulering	minst 50
5. Den inställda tiden för behandling, min	10 ± 0.5
6. Driftläge installationstiden, sek, max	1
8. Kontinuerlig drift, när den körs på batterier AA R6 1.5V, tim., minst	6
9. Maximal spänning i apparaten, V, inte mer än	3,3
10. Apparaten "Akvaton" vikt, gr., inte mer än	240
10. Apparats totala dimension, mm	235x82x53
11. Apparats förpacknings totala dimension, mm	245x155x85

1.2 Tekniska specifikationer.

1.3 Innehåll av produkten

Namn	Antal
Anordningen mikrovågsbehandling "Akvaton-04"	1 st.
Bruksanvisning, kombinerat med ett pass	1 st.
Bruksanvisning	1 st.
Batterier AA R6 1,5V	2 st.
Förpackning	1 st.

TILLVERKARE

LLC "Telemakhos" 410033 Ryssland, Saratov,
Ave 50 år i oktober Str. 101, Bldg. 4, 3: e våningen
Tel. / Fax (8452) 48-82-95, 48-82-96, 48-82-97,
e-post: market@telemak-saratov.ru
<http://www.telemak-saratov.ru>
<http://www.aquatone.su>